

Halterung für Handschuhboxen

Alu Flex 3, Alu Flex 4 und Alu Flex 5



Hygienisch und robust

Hervorragend organisiert: In den HERZmed ALU FLEX Handschuhhalterungen aus edlem Aluminium können bis zu fünf Handschuhboxen sicher verstaut werden. Die flexible Schienenführung ermöglicht eine schnelle und simple Anpassung an unterschiedliche Entnahmemöglichkeiten beziehungsweise Schachtelabmessungen (herstellerabhängig).

Durch die offene Aufmachung kann man mit einem Blick die Handschuhgröße auf der Verpackung der Handschuhe erfassen und das passende Produkt entnehmen. Zudem kann der Anwender die Halterungen ALU FLEX horizontal oder auch vertikal an der Wand montieren. Durch die glatte, pulverbeschichtete Oberfläche wird eine gründliche sowie schnelle Reinigung und Desinfektion gewährleistet.

Anwendung



Schritt 1
Schrauben lockern



Schritt 2
Boxen einlegen, arretieren



Schritt 3
Schrauben wieder fixieren



Highlights

- Passend für Boxen verschiedenster Hersteller
- Stabile, kompakte Bauform,
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten (vertikal/horizontal)
- Hygienische Aufbewahrung
- Einfach und schnell zu reinigen
- Stege flexibel einstellbar für alle gängigen Handschuhboxen
- Individuell an Bedürfnisse anpassbar

Schlüsselloch-T-Bohrung

Die spezielle Bohrung ermöglicht maximale Flexibilität bei der Montage. Der Handschuhhalter kann vertikal oder senkrecht montiert werden.

Aluminiumstrebe

Verstellbare Aluminiumstrebe zur Fixierung der Handschuhboxen.

W-Stanzung

Die W-Stanzung ermöglicht das Anpassen an die verschiedenen Boxengrößen.

Pulverbeschichtetes Aluminium


Der ALU FLEX ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in RAL 7035 pulverbeschichtet. Individuelle Lackierung auf Anfrage möglich.

Stellschraube

Leicht zu verwendende Stellschraube zur schnellen Anpassung an diverse Boxengrößen.

VESA 75

VESA 75 Standard-Bohrung zur einfachen Montage.

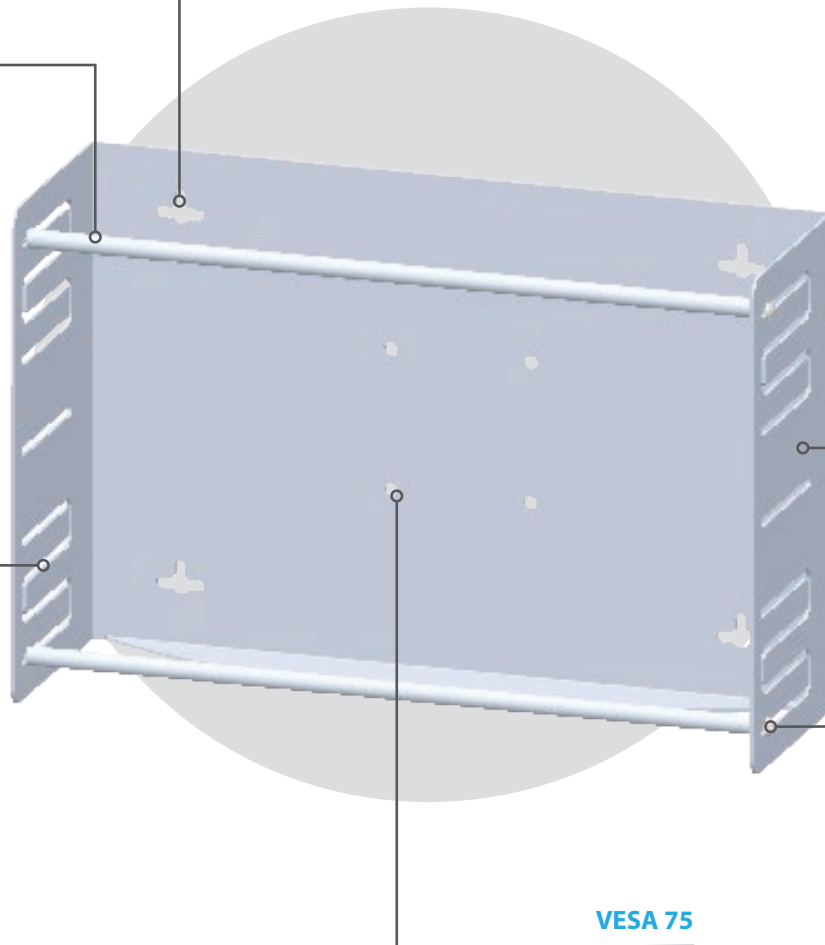

Perfekt organisiert

Durch die praktische „W-Stanzung“ am oberen und unteren Halteblech der Handschuhhalterungen können die Aluminium-Streben an jede gängige Boxengröße angepasst werden. Die zusätzliche „I-Stanzung“ dient zur Arretierung von Links-Rechts-Handschuhen (OP-Bereich). Die Justierung ist schnell und unkompliziert durchführbar. Um die Anpassung vorzunehmen, müssen die Schrauben auf beiden Seiten der Streben etwas gelockert, arretiert und anschließend wieder fixiert werden. Je nach Lagerungsbedarf können Sie zwischen unseren drei Modellgrößen auswählen.

Technische Spezifikationen

Größe:

ALU FLEX 3: 425 × 265 × 125 mm (LxBxH)
 ALU FLEX 4: 550 × 265 × 125 mm (LxBxH)
 ALU FLEX 5: 675 × 265 × 125 mm (LxBxH)

Gewicht:

ALU FLEX 3: ca. 1,18 kg
 ALU FLEX 4: ca. 1,4 kg
 ALU FLEX 5: ca. 1,62 kg

Farbgebung:

Lichtgrau (RAL 7035),
 auf Wunsch andere Lackierung möglich

Material:

Aluminium, pulverbeschichtet

Platz für Standard-Handschuhboxen

ALU FLEX 3: 3 Stück
 ALU FLEX 4: 4 Stück
 ALU FLEX 5: 5 Stück

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung
310300	ALU FLEX 3, Halterung für 3 Standard-Handschuhboxen
310400	ALU FLEX 4, Halterung für 4 Standard-Handschuhboxen
310500	ALU FLEX 5, Halterung für 5 Standard-Handschuhboxen

Bestellung und Beratung durch:



Scan for English version
herzmed.com/downloads



Vertrieb/Sales Office:
 HERZmed GmbH
 Rottenbucher Straße 9
 82497 Unterammergau
Tel.: +49 (0) 8822 824 0002
Fax: +49 (0) 8822 824 0006

Verwaltung/Management:
 HERZmed GmbH
 Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
 82487 Oberammergau
Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.com

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

