

Katheterköcher

Standardversion und Langversion



Optimaler Schutz, hygienische Aufbewahrung

Der Katheterköchler dient zur sachgerechten Aufbewahrung von Kathetern. Um den steigenden Hygieneanforderungen auf den Stationen gerecht zu werden, konzipierte die Firma HERZmed GmbH den Katheterköchler gemäß der Hygieneanforderungen für Sterilgutversorgung (DIN 58953-8: 2010-05).

Die stabile Einheit wehrt Staub, Schmutz, übermäßigen Lichteinfluss sowie Beschädigungen durch mechanischen Einflussnahmen ab. Ein trockener, abgeschlossener und sauberer Innenraum sowie glatte, pulverbeschichtete Oberflächen ermöglichen eine optimale hygienische Reinigung. Daher eignet sich die Einheit Katheterköchler und Aufbewahrungsbox besonders für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern, in Arztpraxen und im Pflegebereich.

Aluminium, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035) – andere Farben nach RAL auf Anfrage



Montage an Normschiene

Wandhalterung und Zubehör optional erhältlich.



Rückansicht



Trennblech



Highlights

- Kompakte Bauform
- Flexible Befestigungsmöglichkeit
- Transparenter Deckel
- Hygienische Aufbewahrung durch geschlossenes System
- Flexible Höhenunterteilung
- Verplombung möglich
- Individuell an Bedürfnisse des Kunden anpassbar


Technische Details

Umlackierung möglich

Standardmäßig werden die Katheterköcher einheitlich in Weißaluminium RAL 9006 ausgeliefert. Eine Umlackierung gemäß RAL-Farbcode ist möglich.

Trennblech im Inneren

Ein herausnehmbares Trennblech teilt den Innenraum des Köchers in seiner Diagonalen. Diese Raumaufteilung ermöglicht ein ordentliches Trennen von 2 verschiedenen Kathetern.

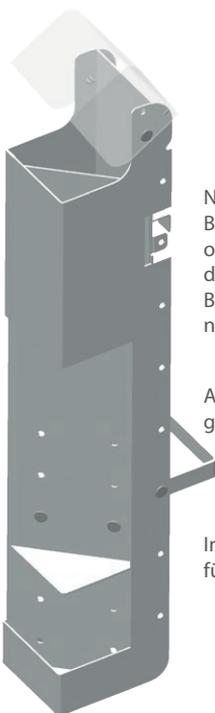

Normschienenhalterung zur Befestigung an einer Normschiene oder optional an die Wand mit der Wandhalterung. Weitere Befestigungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch möglich.


Abstandshalterung zum Abstützen gegen die Wand in zwei Größen.

Inklusive Trennblech mit zwei Höhenteilern für verschiedene Kathetergrößen.



Transparenter Deckel

Der transparente Verschlussdeckel verschafft ein schnelles und leichtes Einsehen in den Köcher und ermöglicht die optische Überprüfung der Füllmenge. Dank des Öffnungswinkels von 125° ist ein leichtes Befüllen und Entnehmen garantiert.

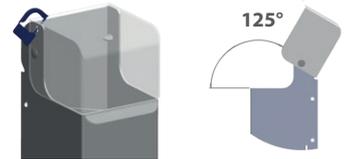

Verplombung möglich

konische Clips zur einfachen Befestigung

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Der Aluminiumköcher kommt mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Damit er jederzeit einsatzbereit ist, kann er entweder direkt an eine Wand montiert oder an Normschienen gehängt werden.

Ergonomische Lösungen für Ihren Arbeitsplatz

Der Katheterköcher kann individuell an Kundenwünsche angepasst werden. Dank verschiedener Innenraumaufteilung und diversen Befestigungsmöglichkeiten ist er immer und überall einsatzbereit. Auch eine Umlackierung in andere RAL Farben ist auf Anfrage möglich. Das Produkt legt seinen Fokus auch auf ergonomische Lösungen. Das zeichnet sich unter anderem durch die optimale Entnahme der Katheter aus.

Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht Standardversion:

100 x 120 x 703 mm (B x T x H)
2200 g Leergewicht

Größe und Gewicht Langversion:

100 x 123 x 1052 mm (B x T x H)
3850 g Leergewicht

Farbgebung:

Gehäuse: RAL 9006,
Umlackierung auf Anfrage möglich
Deckel: Transparent

Material:

Deckel: PETG (mit Glykol modifiziertes Polyethylenterephthalat); Korpus und Einzelteile: Weißaluminium, pulverbeschichtet; Konischer Clip: Kunststoff PA66.

Bestellinformationen

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|--|
| 217020 | Katheterkocher Standardversion, montiert |
| 218000 | Katheterkocher Langversion, montiert |



Grundkörper RAL 9006 // **Trennblech** // **Höhenteiler** 2er Set inkl. 2x Clip // **Deckel** inkl. Deckelniete // **Boden** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Normschienehalterung** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Abstandshalterung lang und kurz** (je inkl. 2x Clip) // Gebrauchs- und Montageanleitung

Ersatzteile und Zubehör:

| Abb. | Einheit | Art. Nr. | Beschreibung | Abb. | Einheit | Art. Nr. | Beschreibung |
|------|---------|----------|---|--|---------|----------|--|
| | Stück | 227027 | Abstandshalterung – kurz 30 mm Wandabstützung für Normschienehalterung inklusive 2 konischen Clips | | Stück | 227023 | Höhenteiler Einlegeboden als Höhen- unterteilung inklusive 2 konischen Clips |
| | Stück | 227028 | Wandhalterung VESA 75 Bohrung, inklusive 4 konischen Clips und 4 Schrauben M5 | | Stück | 227024 | Transparenter Deckel |
| | Stück | 227029 | Konischer Clip | | Stück | 227025 | Normschienehalterung inklusive 2 konischen Clips |
| | Stück | 029.0446 | Universalklaue an Rohr bis Ø 40 & Geräteschiene (25 x 10 mm) aus Aluminium eloxiert, verwendbar mit Wandhalterung | | Stück | 227026 | Abstandshalterung – lang 55 mm Wandabstützung für Normschienehalterung, inklusive 2 konischen Clips |
| | Stück | 227022 | Trennblech | Art.-Nr. Beschreibung 029.0446 Universalklaue (für Wandhalterung) 227031 Konischer Clip (Ersatzteilkit) bestehend aus 10 Stück 227032 Schraubensatz aus VA (Ersatzteilkit), 10x Linsenschrauben M5 x 10 und 10x Mutter M5, selbstsichernd | | | |

Vertrieb/Sales Office:
HERZmed GmbH
Rottenbacher Straße 9
82497 Unterammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002
Fax: +49 (0) 8822 824 0006

Verwaltung/Management:
HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.com

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

