

Katheterköcher

Standardversion und Langversion



MADE IN
GERMANY

Optimaler Schutz, hygienische Aufbewahrung

Der Katheterköcher dient zur sachgerechten Aufbewahrung von Kathetern. Um den steigenden Hygieneanforderungen auf den Stationen gerecht zu werden, konzipierte die Firma HERZmed GmbH den Katheterköcher gemäß der Hygieneanforderungen für Sterilgutversorgung (DIN 58953-8: 2010-05).

Die stabile Einheit wehrt Staub, Schmutz, übermäßigen Lichteinfluss sowie Beschädigungen durch mechanischen Einflussnahmen ab. Ein trockener, abgeschlossener und sauberer Innenraum sowie glatte, pulverbeschichtete Oberflächen ermöglichen eine optimale hygienische Reinigung. Daher eignet sich die Einheit Katheterköcher und Aufbewahrungsbox besonders für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern, in Arztpraxen und im Pflegebereich.

Aluminium, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035) – andere Farben nach RAL auf Anfrage



Montage an Normschiene

Wandhalterung und Zubehör optional erhältlich.



Rückansicht



Trennblech




Highlights

- Kompakte Bauform
- Flexible Befestigungsmöglichkeit
- Transparenter Deckel
- Hygienische Aufbewahrung durch geschlossenes System
- Flexible Höhenunterteilung
- Verplombung möglich
- Individuell an Bedürfnisse des Kunden anpassbar

Technische Details

Transparenter Deckel

Der transparente Verschlussdeckel verschafft ein schnelles und leichtes Einsehen in den Köcher und ermöglicht die optische Überprüfung der Füllmenge. Dank des Öffnungswinkels von 125° ist ein leichtes Befüllen und Entnehmen garantiert.

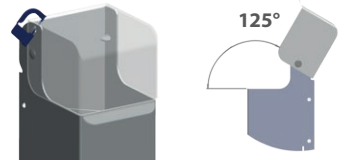

Verplombung möglich

Umlackierung möglich


Standardmäßig werden die Katheterköcher einheitlich in Weißaluminium RAL 9006 ausgeliefert. Eine Umlackierung gemäß RAL-Farbcode ist möglich.

Trennblech im Inneren

Ein herausnehmbares Trennblech teilt den Innenraum des Köchers in seiner Diagonalen. Diese Raumaufteilung ermöglicht ein ordentliches Trennen von 2 verschiedenen Kathetern.

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Der Aluminiumköcher kommt mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Damit er jederzeit einsatzbereit ist, kann er entweder direkt an eine Wand montiert oder an Normschienen gehängt werden.

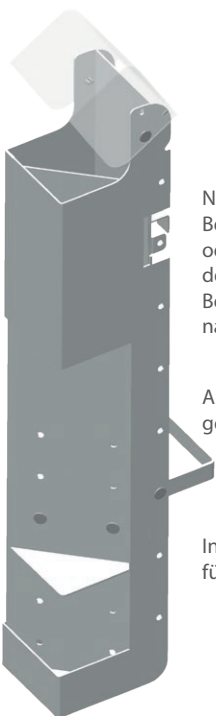

Normschienenhalterung zur Befestigung an einer Normschiene oder optional an die Wand mit der Wandhalterung. Weitere Befestigungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch möglich.

Abstandshalterung zum Abstützen gegen die Wand in zwei Größen.

Inklusive Trennblech mit zwei Höhentellern für verschiedene Kathetergrößen.

Ergonomische Lösungen für Ihren Arbeitsplatz

Der Katheterköcher kann individuell an Kundenwünsche angepasst werden. Dank verschiedener Innenraumaufteilung und diversen Befestigungsmöglichkeiten ist er immer und überall einsatzbereit. Auch eine Umlackierung in andere RAL Farben ist auf Anfrage möglich. Das Produkt legt seinen Fokus auch auf ergonomische Lösungen. Das zeichnet sich unter anderem durch die optimale Entnahme der Katheter aus.

Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht Standardversion:

100 x 120 x 703 mm (B x T x H)
2200 g Leergewicht

Größe und Gewicht Langversion:

100 x 123 x 1052 mm (B x T x H)
3850 g Leergewicht

Farbgebung:

Gehäuse: RAL 9006,
Umlackierung auf Anfrage möglich
Deckel: Transparent

Material:

Deckel: PETG (mit Glykol modifiziertes Polyethylenterephthalat); Korpus und Einzelteile: Weißaluminium, pulverbeschichtet; Konischer Clip: Kunststoff PA66.

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung
217020	Katheterköcher Standardversion, montiert
218000	Katheterköcher Langversion, montiert



Grundkörper RAL 9006 // **Trennblech** // **Höhensteiler** 2er Set inkl. 2x Clip // **Deckel** inkl. Deckelniete // **Boden** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Normschienenhalterung** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Abstandshalterung lang und kurz** (je inkl. 2x Clip) // Gebrauchs- und Montageanleitung

Ersatzteile und Zubehör:

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung	Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	Stück	227027	Abstandshalterung – kurz 30 mm Wandabstützung für Normschienenhalterung inklusive 2 konischen Clips		Stück	227023	Höhensteiler Einlegeboden als Höhen- unterteilung inklusive 2 konischen Clips
	Stück	227028	Wandhalterung VESA 75 Bohrung, inklusive 4 konischen Clips und 4 Schrauben M5		Stück	227024	Transparenter Deckel
	Stück	029.0446	Universalklaue an Rohr bis Ø 40 & Geräteschiene (25 x 10 mm) aus Aluminium eloxiert, ver- wendbar mit Wandhalterung		Stück	227025	Normschienenhalterung inklusive 2 konischen Clips
	Stück	227022	Trennblech		Stück	227026	Abstandshalterung – lang 55 mm Wandabstützung für Normschienenhalterung, inklusive 2 konischen Clips

Art.-Nr. Beschreibung

- 029.0446 Universalklaue (für Wandhalterung)
- 227031 Konischer Clip (Ersatzteilkits) bestehend aus 10 Stück
- 227032 Schraubensatz aus VA (Ersatzteilkits),
10x Linsenschrauben M5 x 10 und 10x Mutter M5, selbstsichernd

Vertrieb/Sales Office:
HERZmed GmbH
Rottenbacher Straße 9
82497 Unterammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002
Fax: +49 (0) 8822 824 0006

Verwaltung/Management:
HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.hertzmed.com

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.hertzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.hertzmed.de einsehen können.

