


**HERZmed Umbettlaken GRIP**  
*EINWEG*

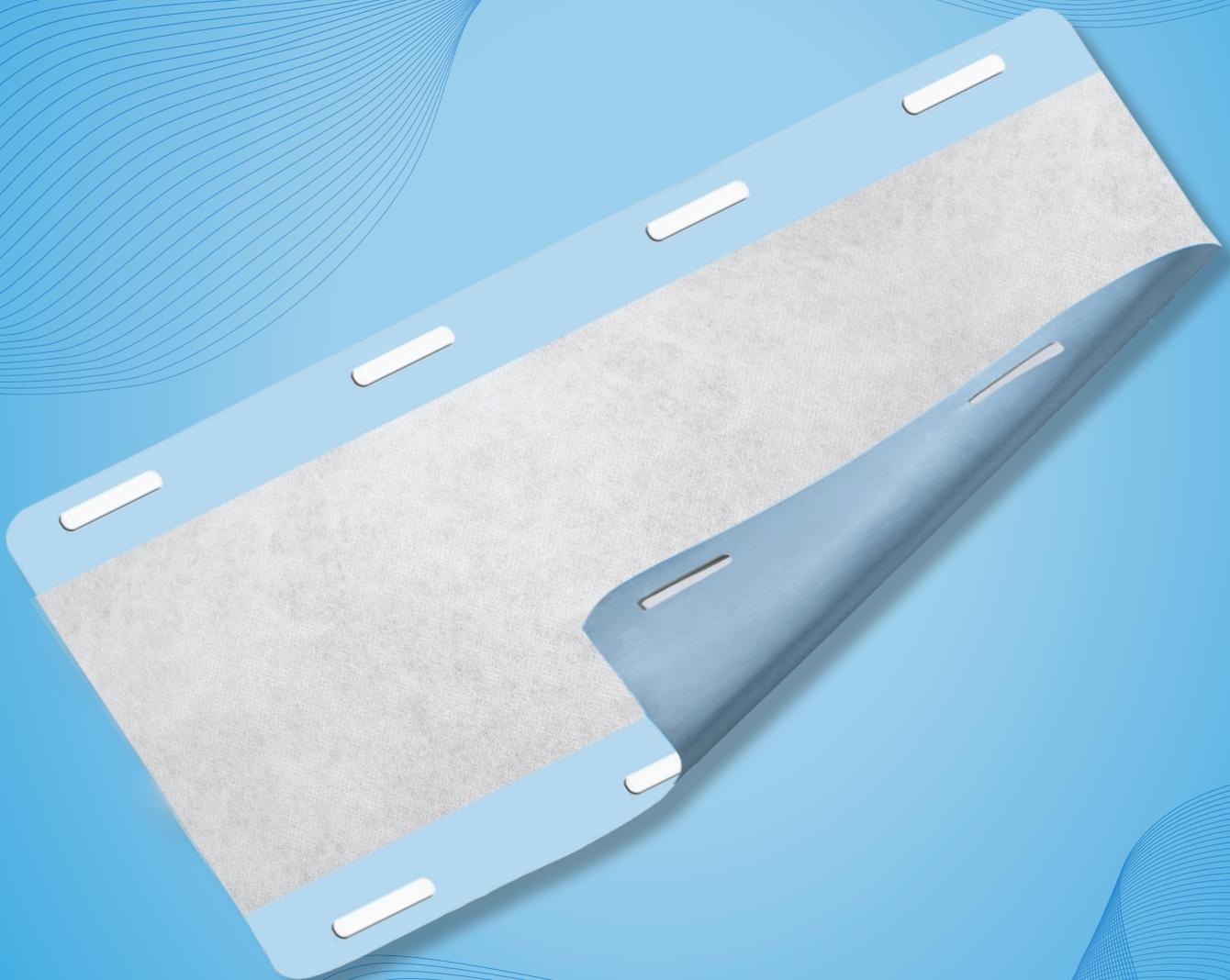

## HERZmed Umbettlaken GRIP EINWEG

Umbettlaken - wasserundurchlässiges, hygienisch und stabil

Die HERZmed Umbettlaken GRIP EINWEG ist für den kurzzeitigen Einmalgebrauch in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen. Das Umbettlaken ist wasserundurchlässig und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierten Keimen auf den Patienten.


Das HERZmed Umbettlaken GRIP EINWEG ist ein Multituch mit den **8 stabilen Handgriffen**, das sich nicht nur zum Heben, Tragen und Ziehen von Patienten bis 180 kg eignet, sondern auch hervorragend als wasserdichte Unterlage (Aufnahme ca. 2,8 Liter) und zum rückschonenden Transfer dient.

Auch erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden des Patienten während des Aufenthalts oder Transport.

### Detailansicht

#### Aufbau des Umbettlaken in vier Schichten:

1. das Gewichttragende Vlies (nonwoven) wird mit
2. einer PE Folien beschichtet (Wasserundurchlässig)
3. die Mittlere Schicht mit dem Absorbierenden Polymer
4. dünnes Vliesmaterial

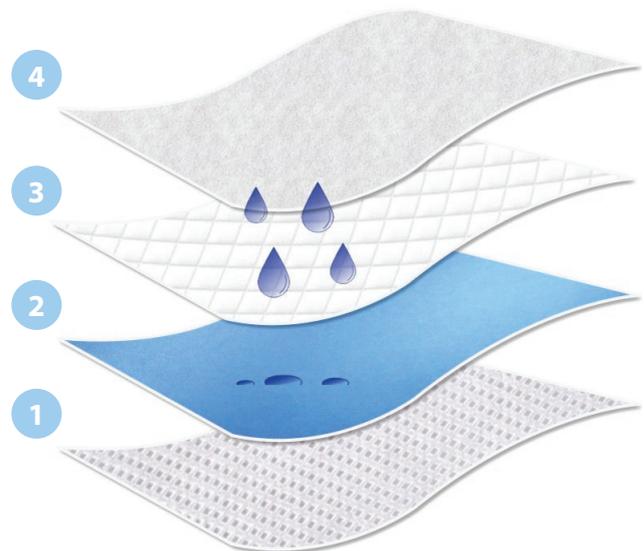

### Anwendung

Das Einmallaken ist wasserundurchlässig, hygienisch und stabil. Den Patienten auf das Multituch und dann auf die Trage legen.

In der Notaufnahme kann der Patient mit dem Multituch mithilfe eines Rollboards von der Trage in das Krankenhausbett transferiert werden.

Nicht **steril**,  
nicht im OP verwenden!



## Multituch

Unterlage und Transfertuch mit Griffen in einem Produkt.

## Griffe

Sicher und stabil dank den 4 Griffen auf beiden Seiten.

## Stark

Tragfähigkeit bis 180 kg.

## Maße

Größe: ca. 210 x 80 cm

## Wasserundurchlässig

Nimmt bis zu 2,8 l Flüssigkeit auf.

## Einzelverpackung

Schneller und sauberer Einsatz.  
Einzel im Vakuum verpackt.

## Hygienische Arbeitsumgebung

Die Verwendung des **Umbettlaken GRIP EINWEG** gewährleistet höchste hygienische Standards. Zudem erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden während des Aufenthalts oder des Transportes des Patienten. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Müll.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein **Einwegprodukt!**

## Technische Spezifikationen

**Größe:**  
ca. 210 x 80 cm

**Gewicht:**  
ca. 200 g

**Farbgebung:**  
Blau

**Verpackung/VPE:**  
Stück einzeln Vakuum verpackt  
Decke gefaltet ca. 50 x 20 mm  
Karton = 20 Stück  
Kartonmaße: 46 x 38 x 29 cm  
Palette = 20 Kartons = 400 Stück

**Lagerung:** Trocken aufbewahren  
**Entsorgung:** im normalen Hausmüll

**Material:**

1. Vlies (nonwoven) wird mit
2. PE Folien (Wasserundurchlässig)
3. Absorbierendes Polymer
4. dünnes Vliesmaterial


**Sterilität:** Nein  
**Einmalprodukt:** Ja

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gramm
100050	HERZmed Umbettlaken GRIP EINWEG	ca. 200 gr.

GTIN sekundäre Verpackung/Karton (20 Stück): 4251697702661

## Bestellung und Beratung durch:

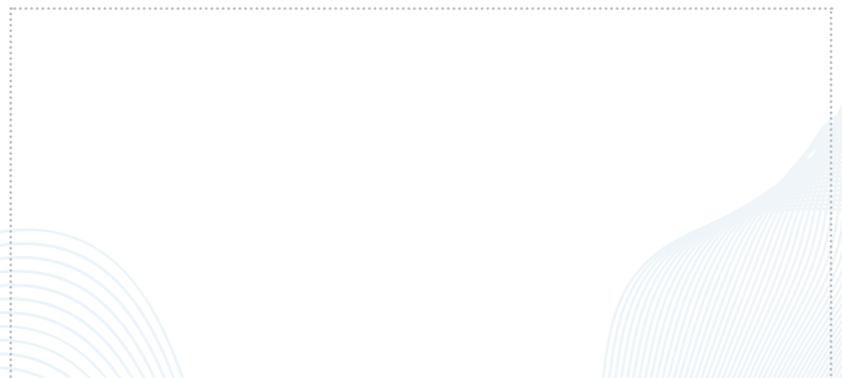

**Vertrieb/Sales Office:**  
HERZmed GmbH  
Rottenbacher Straße 9  
82497 Unterammergau

Tel.: +49 (0) 8822 824 0002  
Fax: +49 (0) 8822 824 0006  
Mail: [herzmed@herzmed.de](mailto:herzmed@herzmed.de)  
Web: [www.herzmed.com](http://www.herzmed.com)

**Verwaltung/Managment:**  
HERZmed GmbH  
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16  
82487 Oberammergau

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter [www.herzmed.de](http://www.herzmed.de). Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter [www.herzmed.de](http://www.herzmed.de) einsehen können.

